

Medical



Te-Pa Medical Oy

**Tutkimustuoli, Geriatriinen tuoli,
Näytteenottotuolit**





Tutkimustuoli 5010
Verhoilu 8567 vaalean sininen

Tutkimustuoli

Tutkimustuoli soveltuu silmä-, korva-, ym. tutkimuksiin. Tuolissa potilas saa hyvän ja rennon asennon tutkimuksen ajaksi. Pulveriepoksimaalattu teräsrunko on tukeva ja kestävä. Tuolin käsitet säätävät automaattisesti selkänöjan asentoa muuttaessa. Tuolin istuimen korkeussäätö tapahtuu sähkötoimisesti jalkaohjaimella tai vaihtoehtoisesti käsiohjaimella (isävaruste). Korkeussäätö on 50 – 90 cm. Selkänöja säätyy kaasujousikevenneisesti 80° - 190° , jolloin tuoli saadaan Trendelenburg asentoon. Tuolia voidaan pyörittää portaattomasti pystyakselinsa ympäri. Pyöritys voidaan lukita jarrulla. Kantapäätuki on säädettävissä mekaanisesti korkeussuunnassa. Samoin päätuki on säädettävissä syvyys- ja korkeussuunnassa. Verhoilu on helposti puhdistettavaa ja kestäväää keinoahkaa, jonka paloluokitus on SL1. Tutkimustuoli on saatavissa kymmenissä eri väreissä. Tuote on CE –merkitty.

Tuolin mitat ovat:
68 x 90 x 125 cm
(leveys x syvyys x korkeus)
Istuinosan syvyys 45 cm
Selkänöjan korkeus 60 cm.

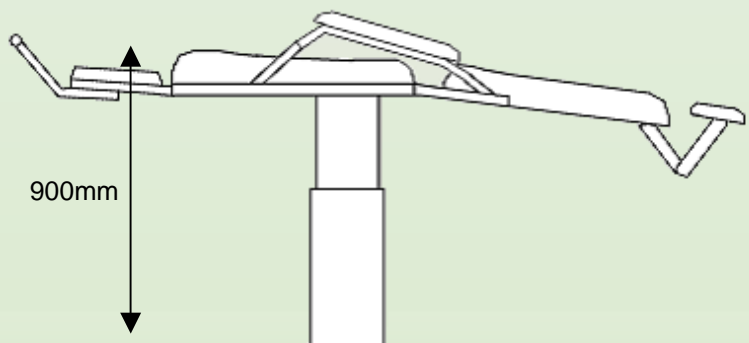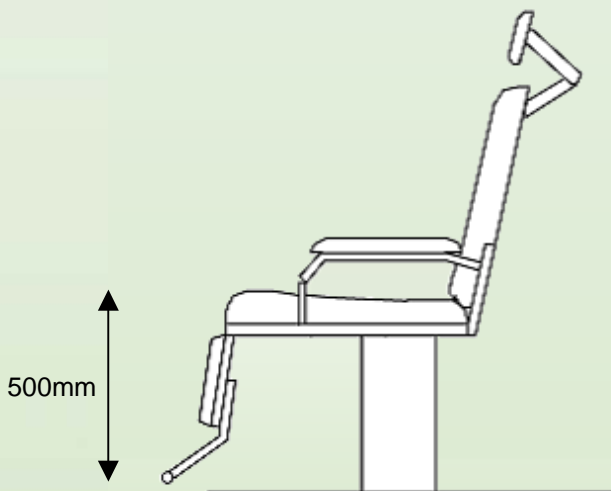

Geriatrinen tuoli



Geriatrinen tuoli 5100



Vakiovarusteena \varnothing 125 mm, harmaa jälkiä jättämätön, lankasuojilla varustettu, tarkkuuskuulalaakeroitu iarrunvörrä

Geriatrinen tuoli soveltuu vanhusten ja kroonikkopotilaiden käyttöön.

Kromattu teräsrunko on kestävä ja helppo pitää puhtaana. Portaattomasti säädettävä kaasujousikeventein selkänoja antaa hyvän istuma-asennon potilaalle. Irroitettava ja muotoiltu niskatyyny tukee hyvin istujan päätä. korkeussäädettävä jalkalauta voidaan säätää eri kokoisille potilaille. Jalkalauta voidaan kääntää myös pystyasentoon jolloin se ei ole tiellä esim. tuolista ylös noustaessa. Vasen käsinoja on irroitettava. Tämä helpottaa potilaan nostamista tuolista esim. sänkyyn. Käsinojassa on turvalukitus, joka estää sen irtoamisen vahingossa. Tuolin vakiovarustukseen kuuluu MDF -levystä valmistettu muovilaminoidu tas. Taso voidaan kääntää tuolin sivulle, jolloin se on aina mukana. Tasossa on turvalukitus, joka estää tason kääntymisen vahingossa. Verhoilu on helposti puhdistettavaa, kestävä ja kosteutta läpäisemätöntä keinonahkaa, jonka paloluokitus on SL1. Tutkimustuoli on saatavissa kymmenissä eri väreissä. Tuoli on varustettu \varnothing 125 mm tarkkuuskuulalaakeroituilla pyörillä. Takana on kaksi täysjarrupyörää ja edessä kaksi suuntapyörää. Tuote on CE -merkitty.

Tuolin mitat ovat:

70 x 70 x 110 cm

(leveys x syvyys x korkeus)

Istuiosan syvyys 47 cm

Selkänojan korkeus 70 cm

Pöytätaso 35 x 62 cm



Näytteenottotuoli 5200
Kaasujousitoiminen
Väri 3345 Punainen

Näytteenottotuolit

Tuolit soveltuvat laboratoriotutkimuksiin. Kolmiosainen rakenne ja istuimen säädöt helpottavat niin potilasta, kuin hoitajaakin. Molemmiin puolin tuolia on säädettävät näytteenottotuet. Niiden korkeutta, etäisyyttä ja kallistuskulmaa voidaan säätää portaattomasti. Lisäksi tuet säätävät selkänojan mukana, kun selkänojaa lasketaan tai nostetaan. Näytteenottotuet on mahdollista myös irrottaa kokonaan. Näytteenottotuolit säätävät Trendelenburg –asentoon. Mallissa 5200 säätö tapahtuu portaattomasti kaasujousen keventämänä. Selkäosan mukana säätyy myös jalkatuki ylös. Sähkötoimisessa mallissa 5200S selkänoja säätyy sähköisesti. Tällöin selkänojaa ei tarvitse avustaa käsin alas. Näytteenottotuolit on varustettu ø100 mm tukevilla täysjarrupyörillä. Verhoilu on helposti puhdistettavaa ja kestävää keinoahkaa, jonka paloluokitus on SL1. Näytteenottotuolit on saatavissa kymmenissä eri väreissä. Tuote on CE –merkitty.



Näytteenottotuoli 5200S
Sähkötoiminen
Väri 3331 vaalean harmaa

Tuolin mitat ovat:
75 x 80 x 125 cm
(leveys x syvyys x korkeus)
Istuinosan syvyys 46 cm
Selkänojan korkeus 67 cm.
Näytteenottotuki 14 x 35 cm.



Vakiovarusteena ø100 mm, harmaa jälkiä jättämätön, lankasuojilla varustettu, tarkkuuskuulalaakeroitu jarrupyörä.



Nousutuki tuoliin
Tuote nro. 5201

Nousutuki helpottaa potilaan nousua ylös tuolista. Tuki on valmistettu teräsputkesta ja se on erittäin tukeva. Tuki tulee molemmiin puolin tuolia. Se on mahdollista irrottaa tarvittaessa. Tuki soveltuu myös vanhempiin Te-Pa Medical Oy:n valmistamiin tuoleihin.